


PRIMA Lab SA
Via Antonio Monti 7
6828 Balerna
Suisse 

+41(0)91 605 1030

info@primahometest.com
www.primahometest.com



La prévention c'est PRIMA®.

*Pour vérifier et maintenir votre santé d'une manière
simple, sûre et économique.*

PRIMA® est une invitation à la santé. C'est un instrument simple, efficace et certifié, créé pour notre tranquillité d'esprit et pour la sérénité des gens que nous aimons.

Avec sa gamme complète de produits sélectionnés et approuvés par les instituts de certification européens les plus importants, **PRIMA®** offre à chacun la possibilité de vérifier son état de santé en évitant de longues attentes et des tests coûteux.

Avec **PRIMA®**, vous pouvez vérifier périodiquement et sans effort le système cardiovasculaire, l'estomac, les voies urinaires, le fer, les reins, la thyroïde, la prostate, le côlon et le cycle de l'ovulation. Les kits complets **PRIMA®** sont prêts à l'emploi et fournissent des résultats certifiés dans l'intimité et le confort de votre domicile.

La prévention n'a jamais été aussi facile : **PRIMA®** est le seul moyen qui vous permet de connaître et de vérifier votre état de santé en seulement 10 minutes, quand vous voulez et où vous voulez.

PRIMA® : La prévention c'est PRIMA®.

PRIMA®, le premier instrument permettant de contrôler votre santé à domicile, propose une gamme complète de kits faciles à utiliser qui fournissent des résultats rapides et certifiés.

PRIMA HOME TEST CHOLESTÉROL

Le test permet de vérifier la concentration de cholestérol dans le sang afin de dépister la présence de valeurs élevées.

PRIMA HOME TEST TÉTANOS

Le test permet de dépister la présence d'anticorps antitétaniques dans le sang afin de vérifier la validité de la vaccination.

PRIMA HOME TEST ALLERGIE – IgE

Le test permet de vérifier le taux d'immunoglobuline E afin de dépister une allergie possible.

PRIMA HOME TEST MULTI-DROGUES

Le test permet de détecter la présence de 5 drogues dans l'urine : amphétamine, méthamphétamine, cocaïne, opiacés et marijuana.

PRIMA HOME TEST REINS-ALBUMINE

Le test permet de mesurer la concentration d'albumine dans l'urine afin de détecter les dysfonctionnements des reins.

PRIMA HOME TEST PROSTATE – PSA

Le test permet de vérifier le taux d'antigène prostatique spécifique - PSA - dans le sang afin de dépister une anomalie physiologique de la prostate.

PRIMA HOME TEST CÔLON-RECTUM – FOB

Le test permet de dépister la présence de sang occulte dans les selles afin de vérifier la présence de lésions gastro-intestinales.

PRIMA HOME TEST THYROÏDE – TSH

Le test permet de vérifier le taux de thyroïdostimuline - TSH - dans le sang afin de dépister une altération physiologique de la thyroïde.

PRIMA HOME TEST ANÉMIE - FER

Le test permet de mesurer le taux de ferritine - FER - dans le sang afin de vérifier les réserves de fer.

PRIMA HOME TEST INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES - 64 ALIMENTS

Le test permet de détecter des intolérances à des aliments dans le sang au moyen d'un test leuco-cytotoxique sur sang humain.

PRIMA HOME TEST INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES - 120 ALIMENTS + 15 ADDITIFS

Le test permet de détecter la présence d'intolérances aux aliments et aux additifs dans le sang au moyen d'un test leuco-cytotoxique sur sang humain.

PRIMA HOME TEST MÉNOPAUSE – FSH

Le test permet de mesurer le taux de la FSH dans l'urine afin de vérifier le bon équilibre hormonal.

PRIMA HOME TEST BABY PACKAGE TEST

Autotest simple et rapide pour la conception assistée (2 tests de fertilité masculine, 5 d'ovulation, 2 de grossesse).

PRIMA HOME TEST OVULATION – LH

Le test permet de vérifier la concentration de LH dans l'urine afin d'identifier les jours de fertilité maximale.

PRIMA HOME TEST GROSSESSE – HCG

Test permettant de mesurer la concentration de la HCG dans l'urine afin de détecter une grossesse potentielle.

PRIMA HOME TEST INFECTIONS VOIES URINAIRES

Le test permet de détecter la présence de leucocytes, protéines et nitrites dans l'urine afin de dépister les infections des voies urinaires.

LA FIABILITÉ DE NOS TESTS

Les études de corrélation avec les tests de laboratoire de référence ont donné des résultats qui sont parfaitement superposables (voir tableau de la fiabilité). Nos produits sont conçus pour fonctionner à domicile et ne nécessitent pas de coûts d'élimination des déchets particuliers.

TEST	ÉCHANTILLON	MÉTHODE DE RÉFÉRENCE / LABORATOIRE	CORRESPONDANCE
CHOLESTÉROL	Goutte de sang	SHIMADZU	98%
ANÉMIE - FER	Goutte de sang	CENTAUR (BAYER)	> 98%
REINS - ALBUMINE	Urine	DADE BNA Nephelometer	> 88%
MÉNOPAUSE - FSH	Urine	CHIRON	> 99%
OVULATION - LH	Urine	UNIPATH	100%
GROSSESSE - HCG	Urine	PROGNOSIS - ROCHE	> 99%
THYROÏDE - TSH	Goutte de sang	ABBOTT Axsym	> 95%
CÔLON RECTUM - FOB	Matière fécale	HEMOCCULT II, HEMOFEC, HEMOLEX	> 93%
PROSTATE - PSA	Goutte de sang	ABBOTT Axsym	88%
TÉTANOS	Goutte de sang	ELISA Novatec	> 90%
ALLERGIE - IGE	Goutte de sang	UPJOHN PHARMACIA	96%
INFECTIONS VOIES URINEAIRES	Urine	COMBUR-TEST	> 98%
MULTI-DROGUES:	Urine	EMIT	
- Amphétamines (AMP)			89%
- Methamphétamines (M-AMP)			89%
- Cocaïne (COC)			98%
- Opiacées (MOR)			100%
- Marijuana (THC)			94%

TEST CHOLESTÉROL

Le test permet de vérifier la concentration de cholestérol dans le sang afin de dépister la présence de valeurs élevées

POURQUOI FAIRE LE TEST?

Le cholestérol, produit par le foie, est principalement absorbé avec la nourriture et a pour fonction de contribuer à former la membrane cellulaire, des neurones et des hormones. Un niveau normal de cholestérol doit être inférieur à 200 mg/dL; dans le cas où ce seuil est dépassé, il existe un risque d'athérosclérose et de crise cardiaque. Contrôler le niveau de cholestérol dans le sang est un bon outil pour vérifier l'état de santé et, si nécessaire, prendre les mesures préventives nécessaires.

QUAND VÉRIFIER LE NIVEAU DE CHOLESTÉROL?

Il est recommandé de vérifier son niveau de cholestérol deux fois par an à tous les adultes ayant un mode de vie sain.

COMMENT FONCTIONNE LE TEST DE CHOLESTÉROL?





Le test fonctionne sur la méthode enzymatique et fournit un résultat quantitatif du niveau de cholestérol dans le sang.

1) L'échantillon utilisé est une goutte de sang obtenue avec l'autopiqueur stérile indolore fourni dans le paquet.

2) Vous obtenez une grosse goutte de sang pressant votre doigt vers le bas.

3) Placez la goutte de sang à l'endroit indiqué sur la carte-test

4) Attendez 40 secondes, puis lisez le résultat.

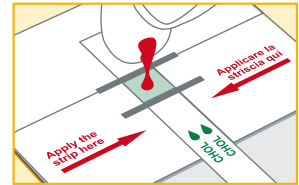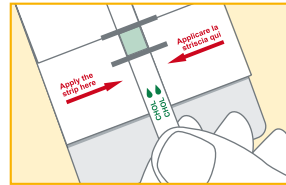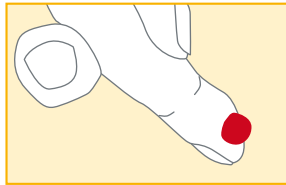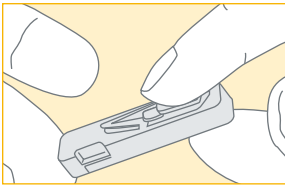

🕒 Le résultat en 40 secondes.



La prévention c'est PRIMA[®].

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.



PRÉVENTION DU TÉTANOS

Auto-test simple et rapide pour la détermination de la présence d'anticorps anti-tétanos dans le sang



TEST TÉTANOS

Le test permet de détecter la présence d'anticorps dirigés contre le tétanos dans le sang.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

Le tétanos est une maladie grave causée par une toxine nerveuse produite par la bactérie *Clostridium tetani*. Ce bacille, parfois présent dans le sol, les voies digestives et les fèces animales, peut entrer dans le corps suite à une blessure. Les toxines du tétanos bloquent la production de neurotransmetteurs, provoquant des contractures et des spasmes musculaires. La vaccination est le seul moyen de prévenir la maladie. L'immunoprotection est évaluée par la mesure du taux d'anticorps anti-tétaniques.

QUAND VÉRIFIER LA PRÉSENCE D'ANTICORPS ANTI-TÉTANIQUES?

Le test peut être utilisé dans des conditions normales afin de vérifier si la protection est toujours efficace après une vaccination faite quelques années plus tôt ou après une blessure très récente (quelques heures avant).

COMMENT FONCTIONNE LE TEST?





Le test détecte spécifiquement la présence d'anticorps dirigés contre ce bacille en décelant si leur concentration est suffisante pour nous protéger contre l'infection.

1) L'échantillon utilisé est une goutte de sang obtenue avec l'autopiqueur stérile indolore fourni dans l'emballage.


2) L'échantillon de sang est recueilli à l'aide d'une pipette en plastique

3) Une goutte de sang est déposée dans le puits.

4) On ajoute le diluant et après 10 minutes, on lit le résultat du test.

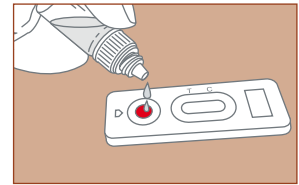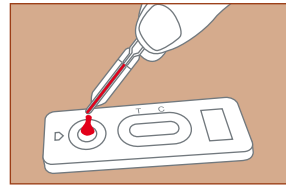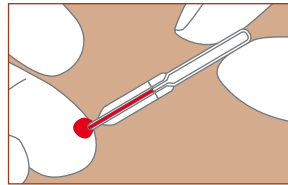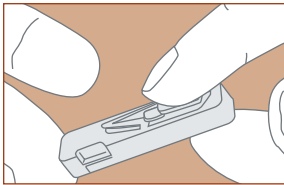

Le résultat en 10 minutes.

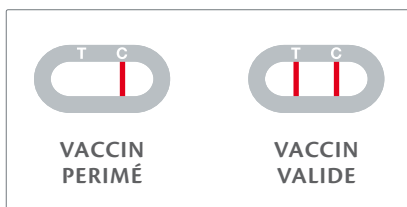

La prévention c'est PRIMA®.

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.



TEST ALLERGIE - IGE

Le test permet de vérifier la présence d'une allergie.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

Les principaux symptômes d'allergie peuvent être des rougeurs de la peau, les yeux larmoyants, des éternuements répétés et l'œdème. Ces symptômes peuvent être confondus avec les signes habituels d'une infection virale et bactérienne comme la grippe, la toux et les maux de gorge. Voilà pourquoi il est important de vérifier si le niveau d'IgE dépasse les taux normaux en présence de ces symptômes ou dans les cas d'un antécédent familial d'allergies.

Contrôler la présence d'une allergie est un excellent outil pour vérifier votre état de santé et, éventuellement, prendre les mesures préventives nécessaires.


QUAND VÉRIFIER LA PRÉSENCE D'ALLERGIES?

Chaque fois que les principaux symptômes d'allergie se manifestent.


COMMENT FONCTIONNE LE TEST D'ALLERGIE?

Le corps réagit à une allergie à travers le système immunitaire en entraînant une augmentation du taux de globuline Imuno E.


1) L'échantillon utilisé est une goutte de sang obtenue avec l'autopiqueur stérile indolore fourni dans l'emballage.

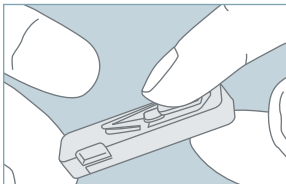


2) L'échantillon de sang est recueilli à l'aide d'une pipette en plastique.

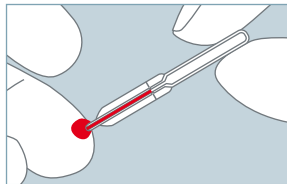


3) Une goutte de sang est déposée dans le puits.

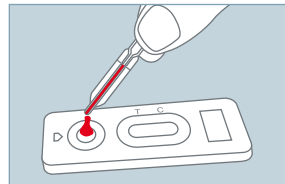

4) On ajoute le diluant et après 10 minutes, on lit le résultat du test.

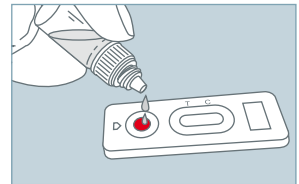

Le résultat en 10 minutes.

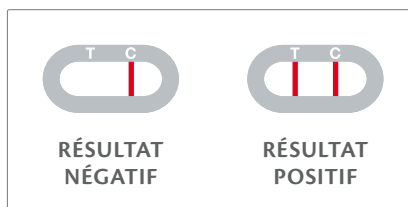

La prévention c'est PRIMA[®].

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.



PRÉVENTION DE L'USAGE DE DROGUES

Autotest simple et rapide pour la détermination de la présence dans l'urine de 5 drogues: amphétamine, méthamphétamine, cocaïne, opiacés et marijuana.

PRIMA®
HOME TEST

TEST MULTI-DROGUES

Le Test Multi-Drogues pour la détermination de la présence d'amphétamine, méthamphétamine, cocaïne, morphine et du THC est un dispositif pour la détection qualitative de l'amphétamine, méthamphétamine, cocaïne, morphine et du THC dans l'urine humaine à des niveaux dépassant respectivement : 1000 ng/ml, 500 ng/ml, 300 ng/ml, 300 ng/ml et 50 ng/ml.

COMMENT FONCTIONNE LE TEST?


Le Test Multi-Drogues est basé sur une réaction immunologique spécifique antigène - anticorps qui est utilisée pour l'analyse de composés spécifiques contenus dans les fluides biologiques.

La vitesse et la sensibilité de ce dispositif immunologique ont fait que cette méthode est devenue la plus largement utilisée pour le dépistage des drogues dans les urines.


1) Trempez verticalement la carte du panneau dans l'urine pendant **5 à 10 secondes**. N'immergez pas au-delà de la zone bleue.

2) Lisez le résultat après 3 à 5 minutes. **NE LISEZ PAS** le résultat au-delà de 8 minutes.

3) **ATTENTION:** L'interprétation des résultats doit être effectuée pour chaque drogue séparément.

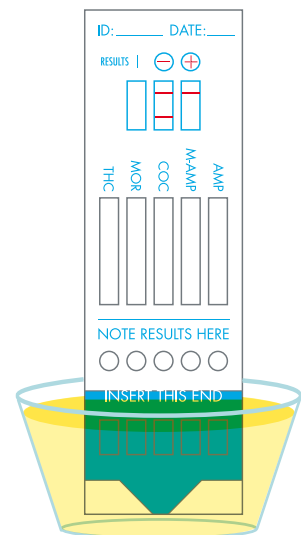

Le résultat en 3 minutes.

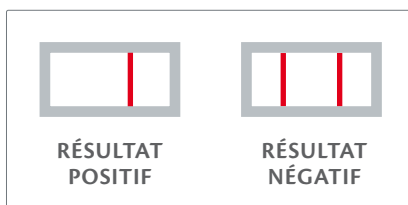

La prévention c'est PRIMA®.

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.



TEST DES REINS - ALBUMINE

Le test contrôle la concentration d'albumine dans l'urine pour vérifier la présence d'altérations de la fonction rénale.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

Une grande quantité d'albumine reflète un dysfonctionnement de la capacité de filtration des reins. Les reins filtrent le sang pour éliminer les impuretés : les composés de petites dimensions sont éliminés dans l'urine tandis que les protéines, qui sont de plus grande taille, sont retenues par les reins. L'albumine est une de ces protéines. Si les reins fonctionnent normalement, l'albumine n'est pas présente dans l'urine ou est présente dans des concentrations très faibles (moins de 10 mg/L). La concentration de glucose ou de triglycérides, le diabète ou l'hypertension sont des facteurs qui favorisent l'augmentation de la concentration d'albumine dans l'urine.

Contrôler la présence d'albumine dans l'urine est un excellent outil pour vérifier votre état de santé et éventuellement prendre les mesures préventives nécessaires.

QUAND VÉRIFIER LA CONCENTRATION D'ALBUMINE DANS L'URINE?

Le dépistage de l'albumine peut aider à identifier la néphropathie progressive et prendre des mesures appropriées pour réduire les dégâts : beaucoup de gens ne sont pas conscients d'être porteurs de la maladie rénale, qui est souvent asymptomatique.

COMMENT FONCTIONNE LE TEST DES REINS - D'ALBUMINE?





Le test signale la concentration d'albumine dans l'urine comme normale ou supérieure à la normale.

1) L'échantillon utilisé est la première urine du matin recueillie avec un récipient propre qui est fourni dans l'emballage.


2) Prenez la bande-test du côté de la poignée.

3) Immergez la bande-test pendant quelques secondes.

4) Attendez 5 minutes, puis lisez le résultat.

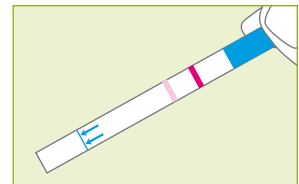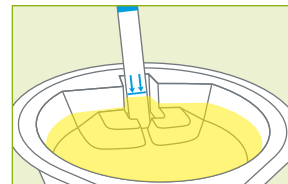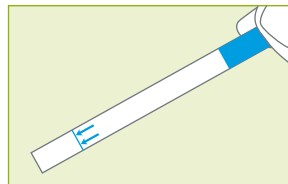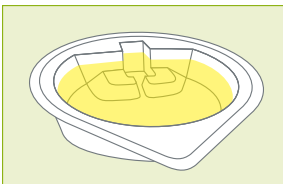

Le résultat en 5 minutes.

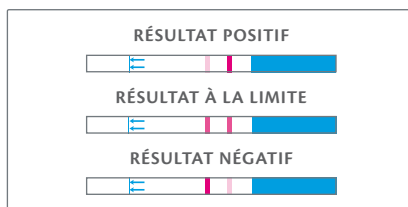

La prévention c'est PRIMA[®].

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.



TEST PROSTATE - PSA

Le test contrôle le taux d'antigène prostatique spécifique - PSA - dans le sang afin de dépister la présence d'une altération physiologique de la prostate.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

Le niveau du PSA dans le sang fournit une estimation des conditions physiologiques de la prostate. Une valeur plus élevée que la normale peut indiquer une hypertrophie de la prostate. Cette modification de la taille de la prostate peut être totalement bénigne - par exemple en raison d'une légère inflammation - mais pourrait avoir des causes malignes. Contrôler la normalité de la valeur de PSA est un bon outil pour vérifier votre état de santé et, éventuellement, prendre les mesures préventives nécessaires. Dans le cas du cancer, le dépistage précoce et la prévention peuvent sauver la vie.

QUAND VÉRIFIER LA VALEUR DE PSA?

Le dépistage des maladies de la prostate est indiqué pour les hommes âgés entre 50 et 75 ans.

COMMENT FONCTIONNE LE TEST PROSTATE - PSA?





Le test fonctionne sur le principe de l'immunochromatographie corrélé au test de laboratoire de référence (EIA). Le seuil est calibré à 4 ng/mL conformément aux standards internationaux.

1) L'échantillon utilisé est une goutte de sang obtenue avec l'autopiqueur stérile indolore fourni dans l'emballage.


2) L'échantillon de sang est recueilli à l'aide d'une pipette en plastique

3) Une goutte de sang est déposée dans le puits.

4) On ajoute le diluant et après 10 minutes, on lit le résultat du test.

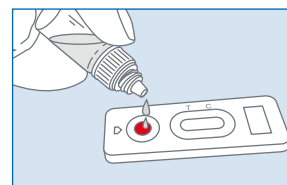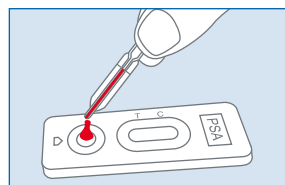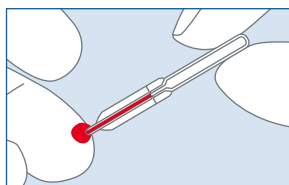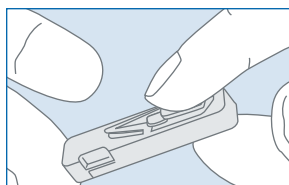

Le résultat en 10 minutes.

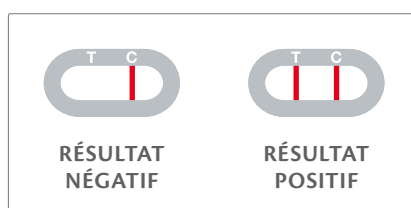

La prévention c'est PRIMA[®].

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.



PRÉVENTION DU CÔLON RECTUM

Autotest simple et rapide de dépistage de sang occulte dans les selles - FOB

PRIMA[®]
HOME TEST

TEST CÔLON RECTUM - FOB

Le test permet de dépister la présence de sang dans les selles afin de vérifier la présence de lésions gastro-intestinales.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

Les lésions gastro-intestinales sont souvent saignantes. Le sang peut être détecté en particulier par analyse des selles. La présence de sang peut être justifiée par diverses causes bénignes telles que les ulcères, les hémorroïdes, les polypes, les diverticules. Il pourrait également être dû à une maladie maligne telle que le cancer colorectal. Contrôler le niveau de cholestérol dans le sang est un bon outil pour vérifier l'état de santé et, si nécessaire, prendre les mesures préventives nécessaires. Dans le cas du cancer, le dépistage précoce et la prévention peuvent sauver la vie.

QUAND VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE SANG DANS LES SELLES?

Le dépistage de sang dans les selles devrait être fait au moins une fois par an chez toutes les personnes âgées de plus de 50 ans.

COMMENT FONCTIONNE LE TEST DU CÔLON RECTUM - FOB?



Le test utilise la méthode immunologique très sensible de nouvelle génération, qui ne prévoit pas de restriction de l'alimentation les jours avant et pendant l'exécution du test.

1) On utilise les matières fécales collectées par le biais des feuilles spéciales qui permettent d'effectuer l'échantillonnage proprement et en tout confort.


2) À l'aide la barre du tube de ramassage fourni avec l'emballage, on recueille l'échantillon de selles 3 fois sur 3 jours différents.

3) L'échantillon est fermé à l'intérieur du tube avec le diluant.

4) On applique le diluant et après 10 minutes seulement, le résultat de la réaction est disponible.

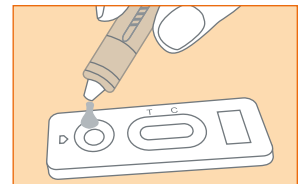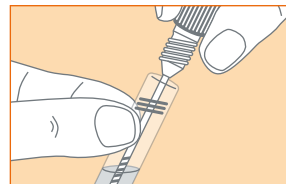


Le résultat en 10 minutes.

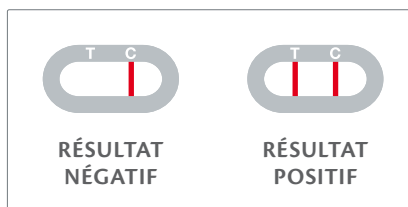

La prévention c'est PRIMA[®].

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.

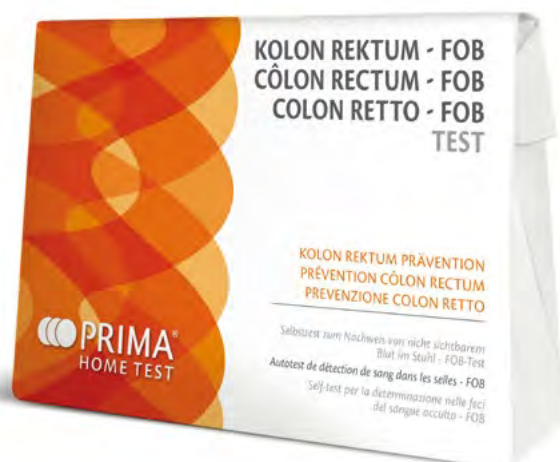

TEST THYROÏDE - TSH

Le test contrôle le taux de thyroïdienne - TSH - dans le sang afin de vérifier la présence d'une altération physiologique de la thyroïde.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

La thyroïdienne contrôle l'activité sécrétoire des hormones de la glande thyroïde en augmentant la production de thyroxine et triiodothyronine. Sa production est contrôlée par l'hypothalamus et l'hypophyse. Par conséquent, une valeur élevée du taux de TSH indique une faible activité de la thyroïde. Contrôler la normalité du taux de TSH est un bon outil pour vérifier votre état de santé et, éventuellement, prendre les mesures préventives nécessaires.

QUAND FAIRE LE TEST?

Le dépistage de la TSH doit être effectué chaque année chez toutes les femmes âgées entre 35 et 64 ans menant un mode de vie sain. Les troubles de la thyroïde sont l'un des problèmes médicaux les plus répandus dans le monde, en particulier chez les femmes, qui souffrent de plus en plus de l'activité faible de la thyroïde (hypothyroïdie).

COMMENT FONCTIONNE LE TEST?




Le test fonctionne sur le principe de l'immunochromatographie corrélé au test de laboratoire de référence. Le seuil est calibré à 5 µIU/mL conformément aux standards internationaux.

1) L'échantillon utilisé est une goutte de sang obtenue avec l'autopiqueur stérile indolore fourni dans l'emballage.


2) L'échantillon de sang est recueilli à l'aide d'une pipette en plastique

3) Une goutte de sang est déposée dans le puits.

4) On ajoute le diluant et après 10 minutes, on lit le résultat du test.

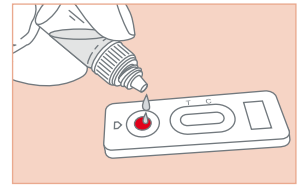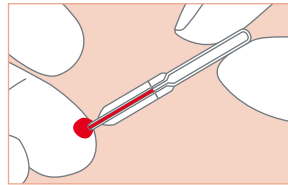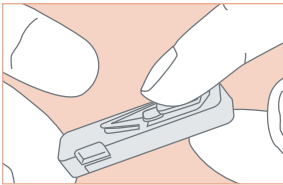

Le résultat en 10 minutes.

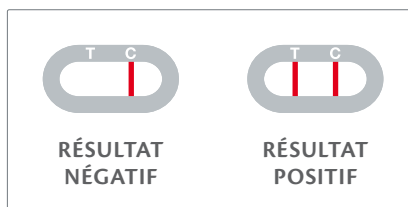

La prévention c'est PRIMA[®].

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.



PRÉVENTION ANÉMIE

Autotest simple et rapide pour la détermination du taux de ferritine - FER - dans le sang

PRIMA®
HOME TEST

TEST ANÉMIE - FER

Le test permet de mesurer le taux de ferritine dans le sang afin de vérifier le niveau des réserves de fer.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

La ferritine est une protéine qui permet l'accumulation et le stockage du fer présent dans les cellules. Elle constitue une réserve de fer, qu'elle accumule et relâche en fonction des besoins de l'organisme. Par conséquent, vérifier le taux de ferritine signifie contrôler les réserves de fer du corps. En fait, le premier indicateur d'une carence en fer est précisément l'ampleur des stocks dont la concentration va diminuer jusqu'à des niveaux très faibles. La carence en fer fait augmenter les stocks qui s'épuisent avant que l'anémie se manifeste. Vérifier la normalité des stocks de fer est un excellent outil pour détecter de l'anémie causée par la carence en fer et prendre les mesures préventives nécessaires.

QUAND FAIRE LE TEST?

Il est recommandé de vérifier le taux de fer à toutes les personnes ayant un mode de vie sain et aux femmes enceintes.

COMMENT FONCTIONNE LE TEST?





Le test fonctionne sur le principe de l'immunochromatographie corrélé au test de laboratoire de référence. Le seuil est étalonné à 20 ng/mL conformément aux standards internationaux.

1) L'échantillon utilisé est une goutte de sang obtenue avec l'autopiqueur stérile indolore fourni dans l'emballage.


2) L'échantillon de sang est recueilli à l'aide d'une pipette en plastique

3) Une goutte de sang est déposée dans le puits.

4) On ajoute le diluant et après 10 minutes, on lit le résultat du test.

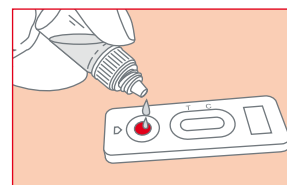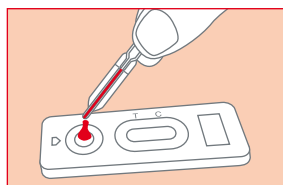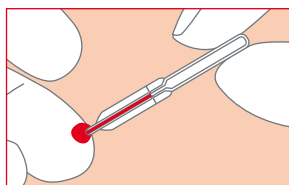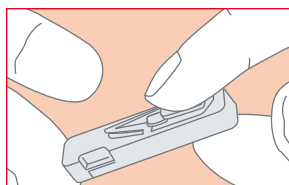

Le résultat en 10 minutes.

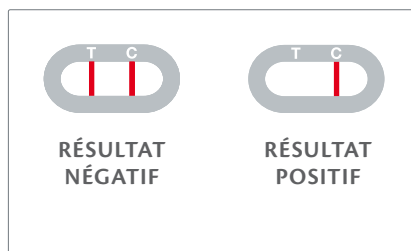

La prévention c'est PRIMA®.

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.



TEST DES INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES

Facile d'utilisation, ce test permet de détecter des intolérances à des aliments dans le sang au moyen d'un test leucocytotoxique sur sang humain.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

Facile d'utilisation, ce test permet de détecter des intolérances à des aliments dans le sang au moyen d'un test leucocytotoxique sur sang humain. Les intolérances alimentaires sont souvent dues à un certain nombre de troubles qui proviennent de l'incapacité du corps à digérer complètement certains aliments, qui ne sont dégradés qu'au niveau des macromolécules et ne peuvent être utilisés ni pour la production d'énergie, ni pour la croissance cellulaire. Leur accumulation dans le temps le long de la paroi intestinale est la cause de processus inflammatoires.




COMMENT FONCTIONNE LE TEST?

1) L'échantillon de sang: Faire une piqûre à l'aide d'une lancette et déposer une grosse goutte à l'intérieur du cercle sur la carte de test, sans appuyer sur la touche de la membrane. L'échantillon doit couvrir toute la zone absorbante !

2) Remplissez le questionnaire ci-joint dans toutes ses parties et signez-le. Mettez la carte de test et le formulaire dans l'enveloppe fournie avec le kit. Envoyez tout le jour même.

3) Après avoir reçu l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse de la modification des granulocytes neutrophiles exposés à des extraits alimentaires hautement purifiés, en déterminant les éventuelles intolérances alimentaires et leur niveau (faible, moyen, élevé).

4) Sur la base des résultats de laboratoire, un rapport contenant les résultats du test est rédigé, ainsi que des conseils nutritionnels personnalisés. Ce document est livré à l'adresse de courriel indiquée dans le formulaire d'information client, qui a été envoyé avec l'échantillon.

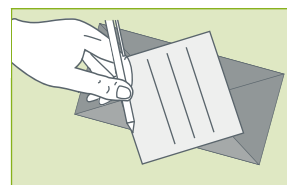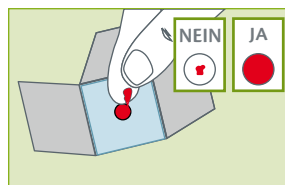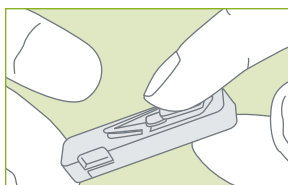

La prévention c'est PRIMA[®].

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité.



64 ALIMENTS

PRODUITS LAITIERS: Lait de chèvre, lait de vache, lait de brebis.

LEVURE: Levure chimique, levure de bière.

FRUITS & FRUITS SECS: Pomme, poire, prune, raisin, kiwi, fraise, abricot, pêche, banane, ananas, melon, orange, citron, noix, amande, arachide, olive.

LÉGUMES: Pomme de terre, courgette, aubergine, laitue, poivron, tomate, chou, épinards, oignon, céleri, carotte, asperge, concombre, assortiment de champignons.

VIANDE: Dinde, poulet, lapin, porc, bœuf, agneau.

POISSON: Saumon, thon, crevettes, morue, sole, assortiment de céphalopodes.

CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES: Blé, riz, maïs, orge, soja, pois, orge, haricots.

ÉPICES: Ail, poivre.

ÉDULCORANTS: Cacao, sucre, miel.

AUTRES: Café, œufs, thé.

120 ALIMENTS + 15 ADDITIFS

PRODUITS LAITIERS: Lait de chèvre, lait de vache, lait de brebis.

LEVURE: Levure chimique, levure de bière.

FRUITS & FRUITS SECS: Pomme, poire, prune, raisin, kiwi, fraise, abricot, pêche, banane, ananas, melon, orange, citron, noix, amande, arachide, olive, fruits des bois, cerise, pastèque, mandarine, figue, noisette, châtaignier, pistache, noix de coco, papaye, cèdre, pamplemousse.

LÉGUMES: Pomme de terre, courgette, aubergine, laitue, poivron, tomate, chou, épinards, oignon, céleri, carotte, asperges, concombre, assortiment de champignons, radicchio, haricots verts, betterave, courge, artichaut, chicorée, endive, fenouil, radis, roquette.

VIANDE: Dinde, poulet, lapin, porc, bœuf, agneau, cheval, cerf, sanglier.

POISSON: Saumon, thon, crevettes, morue, sole, assortiment de céphalopodes, crevettes, anchois, palourde, truite, cigale de mer, rouget, maquereau.

CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES: Blé, riz, maïs, orge, soja, pois chiche, épeautre, haricots, lentilles, pois chiches, seigle, haricot, lécithine, sarrasin.

ÉPICES: Ail, poivre, persil, origan, menthe, romarin, basilic, marjolaine, clous de girofle, feuilles de laurier, sauge, noix de muscade, thym, cannelle, vanille, câpres.

ÉDULCORANTS: Cacao, sucre, miel, cassonade, saccharine, fructose, sirop d'érable.

AUTRES: Café, œufs, thé.

ADDITIFS: Glutamate, glycérine, nitrate de sodium, acide ascorbique, acide citrique, sulfate de nickel, jaune E102, E110 orange, acide carminique E120, érythrosine E127, E155 brun, pectine, polyphosphates, sorbate de potassium, benzoate de sodium.

TEST POUR LA MÉNopause - FSH

Vérifiez la concentration de FSH dans l'urine.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

L'hormone folliculo-stimulante (FSH) est une hormone dont le taux augmente au cours de la ménopause. La sécrétion de FSH induit la pro-duction du follicule et la sécrétion de LH (hormone lutéinisante) induit l'ovulation. La détermination des taux de FSH et de LH permet de détecter l'aménorrhée et les cycles anovulatoires.

QUAND FAIRE LE TEST?

La ménopause apparaît chez les femmes à l'âge de 51 ans en moyenne, ou plutôt entre 45 et 55 ans selon l'individu. Vérifier la FSH permet de prendre de meilleures actions préventives pour maintenir l'équilibre hormonal et un mode de vie sain.

COMMENT FONCTIONNE LE TEST?





Le test signale la concentration de FSH dans l'urine comme normale ou supérieure à la normale (25 mIU/mL).

1) L'échantillon utilisé est la première urine du matin.


2) Prenez le récipient de collecte et tenez la pointe absorbante directement sous l'écoulement de l'urine.

3) Refermez la pointe absorbante.

4) Attendez 5 minutes, puis lisez le résultat.

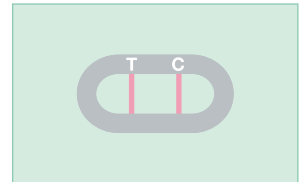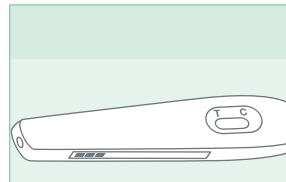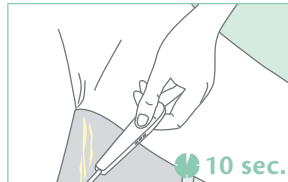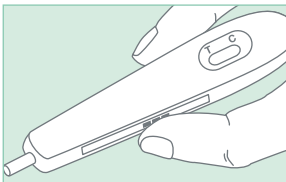

Le résultat en 5 minutes.

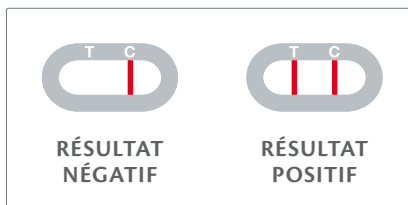

2 TESTS



La prévention c'est PRIMA®.

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.

BABY PACKAGE TEST

Set d'autotests simples et rapides pour la conception assistée
(potentiel de fécondité masculin, ovulation, grossesse)

PRIMA®
HOME TEST

BABY PACKAGE TEST

Un kit composé par 2 tests de fertilité masculine, 5 d'ovulation, 2 de grossesse, pour les couples d'adultes souhaitant avoir un enfant.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

La stérilité touche environ 10 à 15 % des couples en âge de procréer et 40 à 50 % des cas de stérilité sont dus à des problèmes relatifs au sperme. Le Test de fertilité masculine vous permet de savoir si un échantillon de sperme présente une activité normale ou inférieure à la normale. L'activité normale est associée à des probabilités de grossesse plus élevées.

Pour détecter l'hormone lutéinisante dans l'urine: Au cours du cycle menstruel, il existe certaines hormones qui sont responsables d'une série de changements dans l'appareil de reproduction féminin. La présence de ces hormones détermine l'alternance entre les jours fertiles et infertiles. La fécondation n'est possible que pendant les jours fertiles. Les hormones LH et FSH sont responsables chez les femmes du cycle ovulatoire complexe. L'augmentation et la libération de LH déclenche l'ovulation dans les prochaines 24 à 40 heures.


Pour vérifier la concentration de l'hormone hCG dans l'urine pour détecter la grossesse : Quand une femme est enceinte, son corps commence à produire une hormone appelée hCG (gonadotrophine chorionique humaine). Elle est présente dans l'urine à des concentrations qui augmentent pendant la grossesse.

INDIQUÉ POUR

Couples d'adultes souhaitant avoir un enfant.

COMMENT FONCTIONNE LE TEST?

L'emballage contient 3 test emballés individuellement. Chaque test doit être réalisé séparément des autres.

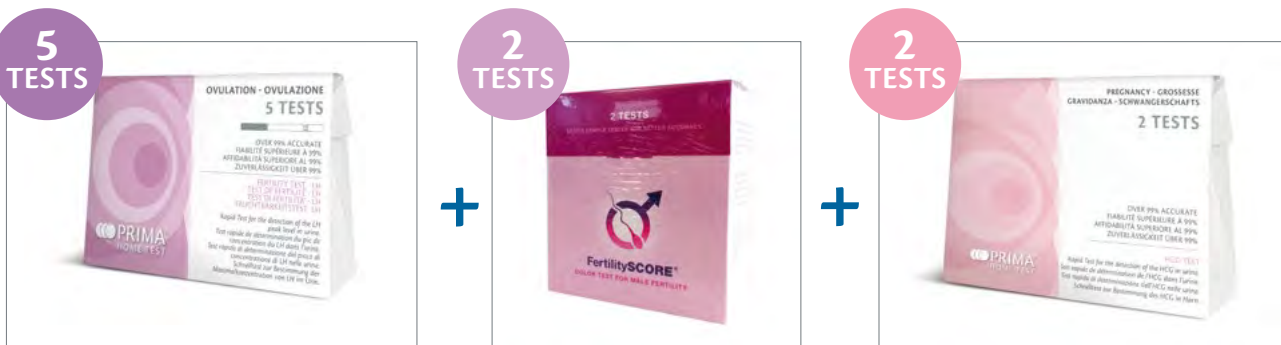

La prévention c'est PRIMA®.

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites les tests directement à votre domicile.



CONTENU: 5 tests d'ovulation; 2 tests de grossesse; 2 tests du potentiel de fécondité masculin.

CE 0483 CE 0344 CE 0483

OVULATION

Autotest simple et rapide pour la détermination de l'hormone de l'ovulation - LH - dans l'urine



TEST D'OVULATION - LH

Un test qualitatif rapide qui permet de détecter l'hormone lutéinisante dans l'urine. Il est ainsi possible de connaître à l'avance le jour de l'ovulation et donc d'augmenter les chances de conception.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

Au cours du cycle menstruel, il existe certaines hormones qui sont responsables d'une série de changements dans l'appareil de reproduction féminin. La présence de ces hormones détermine l'alternance entre les jours fertiles et infertiles. La fécondation n'est possible que pendant les jours fertiles. Les hormones LH et FSH sont responsables chez les femmes du cycle ovulatoire complexe. L'augmentation et la libération de LH déclenche l'ovulation dans les prochaines 24 à 40 heures.


QUAND FAIRE LE TEST?

Il est utile d'identifier les jours fertiles pour avoir de meilleurs chances de tomber enceinte en moins de temps.


COMMENT FONCTIONNE LE TEST?

Le test signale la concentration de l'hormone LH dans l'urine comme normale ou supérieure à la normale (30 mIU/ml).


1) L'échantillon utilisé est la première urine du matin recueillie avec un récipient propre qui est fourni dans l'emballage.

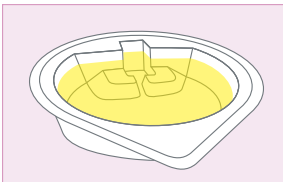


2) Prenez la bande-test du côté de la poignée.

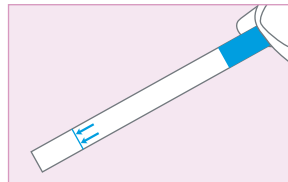


3) Immergez la bande-test pendant quelques secondes.

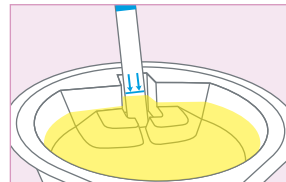

4) Attendez 5 minutes, puis lisez le résultat.

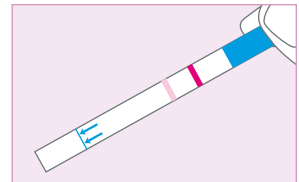

Le résultat en 5 minutes.

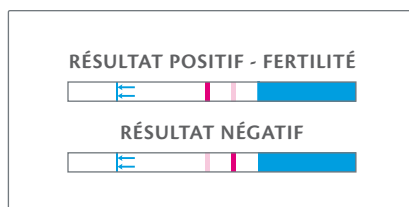

La prévention c'est PRIMA®.

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.



TEST DE GROSSESSE - HCG

Permet de vérifier la concentration de l'hormone hCG dans l'urine pour détecter la grossesse.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

Quand une femme est enceinte, son corps commence à produire une hormone appelée hCG (gonadotrophine chorionique humaine). Elle est présente dans l'urine à des concentrations qui augmentent pendant la grossesse.


QUAND FAIRE LE TEST?

Un diagnostic précoce de la grossesse est important pour assurer la santé et le bien-être de l'enfant.

COMMENT FONCTIONNE LE TEST?

Le test signale la concentration de l'hormone hCG dans l'urine comme normale ou supérieure à la normale. En seulement 5 minutes, vous pouvez détecter un niveau d'hCG supérieur à 25 mIU/ml.

Le résultat en 5 minutes.

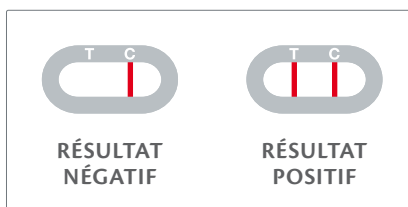

La prévention c'est PRIMA®.

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.



TEST D'INFECTION DES VOIES URINAIRES

Vérifiez la présence de leucocytes et/ou de protéines et/ou de nitrites dans l'urine pour détecter des infections des voies urinaires causées par des bactéries.

POURQUOI FAIRE LE TEST?

L'infection des voies urinaires est généralement causée par des bactéries. Hommes, femmes et enfants peuvent contracter une infection de ce type. Le test est recommandé en présence de symptômes tels que : fréquence excessive ou brûlure pendant la miction, urine trouble ou malodorante. Les premiers stades de l'infection pouvant être asymptomatique, il est très important de la détecter le plus tôt possible afin d'éviter le développement de maladies plus graves et douloureuses. Détecter les infections des voies urinaires est un bon outil pour vérifier votre état de santé et, éventuellement, prendre les mesures préventives nécessaires.


QUAND VÉRIFIER LA PRÉSENCE D'INFECTIONS DES VOIES URINAIRES?

Le test est recommandé pour toutes les personnes qui souffrent de troubles des voies urinaires occasionnels et/ou récurrents.


COMMENT FONCTIONNE LE TEST DES INFECTIONS DES VOIES URINAIRES?

Le test signale la présence de leucocytes, de protéines et de nitrites en quantités supérieures à la normale.


1) L'échantillon utilisé est la première urine du matin recueillie avec un récipient propre qui est fourni dans l'emballage.

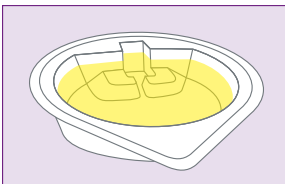


2) Chaque champ de la bande-test vérifie la présence de la substance relative.

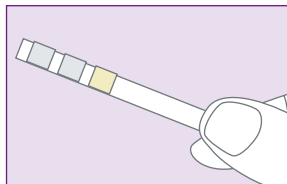


3) Immergez la bande-test pendant 2 secondes

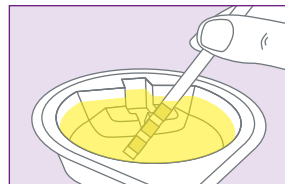

4) Attendez une minute, puis vérifiez les couleurs des champs de la bande-test.

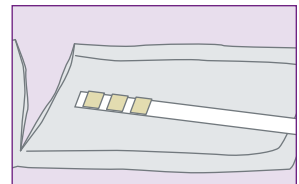

Le résultat en 1 minute.

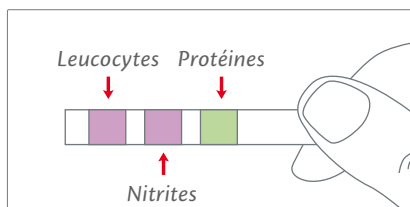

La prévention c'est PRIMA[®].

Prélevez l'échantillon facilement, en toute sécurité, et faites le test directement à votre domicile.

2
TESTS





**TEST
CHOLESTÉROL**
Indiqué pour:
Tous



**TEST
ALLERGIE - IGE**
Indiqué pour:
Tous



**TEST
INFECTION DES VOIES
URINAIRES**
Indiqué pour:
Tous



**TEST
REINS-ALBUMINE**
Indiqué pour:
Tous (hypertension)



**TEST DES
INTOLÉRANCES
ALIMENTAIRES**
Indiqué pour:
Tous



**TEST
PROSTATE - PSA**
Indiqué pour:
Hommes de 45 à 75 ans



**TEST
CÔLON RECTUM - FOB**
Indiqué pour:
Hommes et femmes à partir
45 ans jusqu'à 75 ans



**TEST
THYROÏDE - TSH**
Indiqué pour:
Femmes à partir de
35 ans jusqu'à 65 ans



**TEST
ANÉMIE - FER**
Indiqué pour:
Tous



**TEST
MÉNOPAUSE - FSH**
Indiqué pour:
Femmes



**TEST
OVULATION - LH**
Indiqué pour:
Femmes



**TEST
GROSSESSE - HCG**
Indiqué pour:
Femmes



**BABY PACKAGE
TEST**
Indiqué pour:
Couples d'adultes souhaitant
avoir un enfant



**TEST
MULTIDROGUES**
Indiqué pour:
Tous



**TEST
TÉTANOS**
Indiqué pour:
Tous

PRIMA Lab SA
Via Antonio Monti 7
6828 Balerna - Suisse 
T. +41(0)91 605 1030

www.primahometest.com
info@primahometest.com

Vertrieb Schweiz / Distribution Suisse:

SUPAIR

Supair Care AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

www.supair-care.ch



© All rights reserved.

La prévention c'est PRIMA®.

PRIMA®
HOME TEST



PRIMA Lab SA
Via Antonio Monti 7
6828 Balerna - Suisse 
T. +41(0)91 605 1030

www.primahometest.com
info@primahometest.com

Vertrieb Schweiz / Distribution Suisse:

SUPAIR

Supair Care AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

www.supair-care.ch

CE

© All rights reserved.



PRIMA Lab SA
Via Antonio Monti 7
6828 Balerna - Suisse 
T. +41(0)91 605 1030

www.primahometest.com
info@primahometest.com

Vertrieb Schweiz / Distribution Suisse:

SUPAIR

Supair Care AG
Europastrasse 30
8152 Glattbrugg

www.supair-care.ch



© All rights reserved.